

透明质酸钠含量测定

色谱柱: Hungpu<sup>®</sup> Sugar-H 300\*7.8\*8μm


流动相: 1%磷酸水溶液

流速: 0.6ml/min

检测器: UV232nm

进样量: 20μl

柱温: 40℃

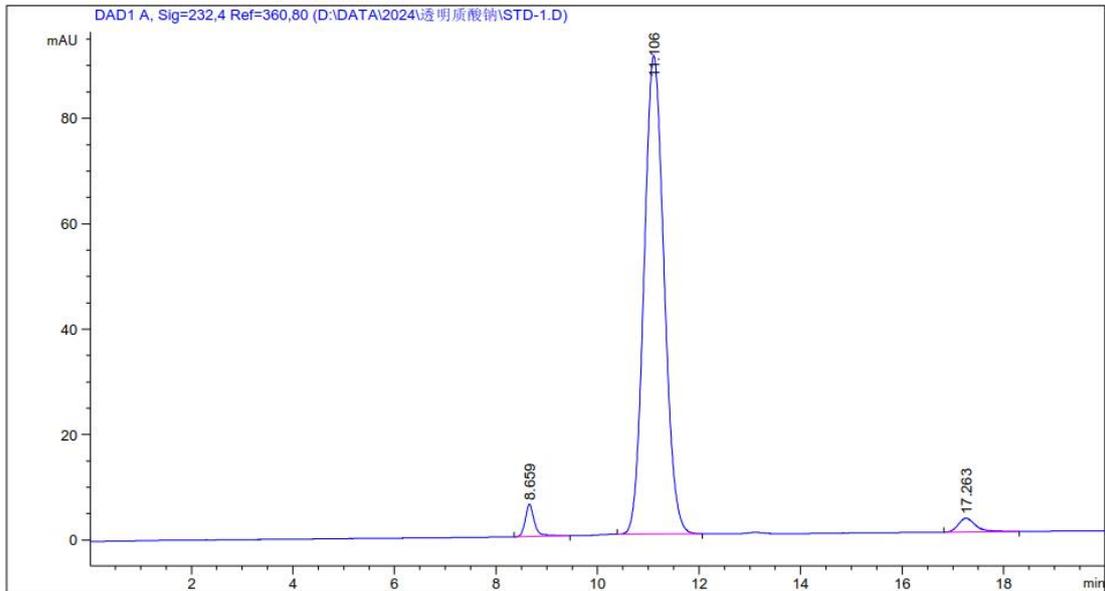

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰面积 %	名称
1	8.659	BB	0.1866	77.06806	2.9407	?
2	11.106	BB	0.4271	2481.39160	94.6833	透明质酸钠
3	17.263	BB	0.3547	62.26857	2.3760	?

总量 : 2620.72824

订购信息:

货号	描述
HP-H08-7830	Hungpu <sup>®</sup> Sugar-H 300*7.8*8μm

